

ZITZI SHARKY



boavista
solutions

...THE WAY

ZITZI SHARKY




SHARKY

Depois de anos de sucesso com o DELFI, foi decidido que era necessário criar um sistema de assento semelhante para jovens e adultos. O SHARKY foi especificamente desenhado para jovens e adultos com uma variedade de deformidades musculares. É conveniente para utilizadores entre os 11 anos de idade até a idade adulta. O SHARKY promove ao utilizador uma estabilidade postural e uma facilidade de movimento enquanto sentado.

O SHARKY promove um assento dinâmico de posicionamento feito em plástico, que não é completamente rígido para que o utilizador pode fazer certos movimentos. O assento é equipado nas costas com o "flex-joint" que vai criar um dinamismo adicional.


FLEX-JOINT

O assento está equipado com o "flex-joint" para tornar o posicionamento do assento mais dinâmico, e isto vai ajudar em quebrar o tonos muscular e a espasticidade. O ângulo das costas pode ser ajustado desde 5º para frente e 30º para trás.

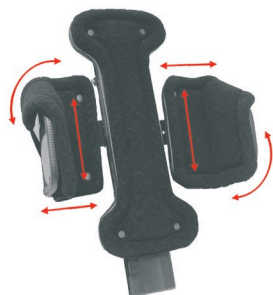

APOIO DE COSTAS AJUSTÁVEIS

É recomendado para utilizadores com escoliose. As peças torácicas são ajustáveis independentes em altura e largura.

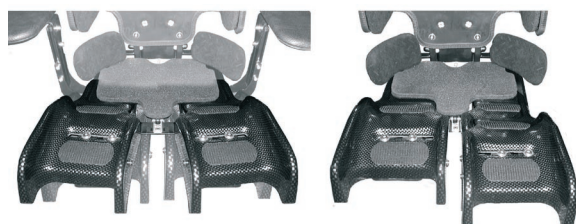


APOIO DE PERNAS AJUSTÁVEIS

As pernas pode ser ajustado para acomodar uma abdução ou adução independente da anca, bem como no comprimento da perna. Um ajuste pode também ser feito nas pernas para acomodar a obliquidade pélvica.




ZITZI SHARKY

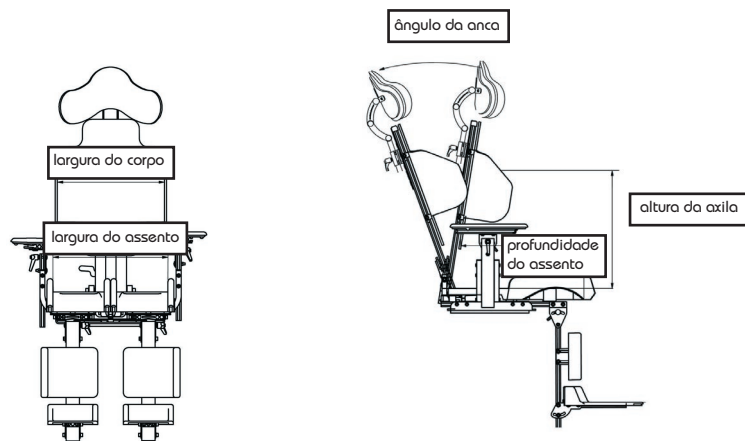


CARACTERÍSTICAS	Tamanho 1	Tamanho 2
Largura do Assento	34 - 39 cm	41 - 46 cm
Profundidade do Assento	33 - 46 cm	39 - 50 cm
Altura Total das Costas até a Axila	31 - 47 cm	31 - 50 cm
Altura do Utente (Aproximada)	125 - 160 cm	150 - 185 cm
Peso do Utente (Aproximada)	80 kg	115 kg
Abdução	10°	10°
Diferença da Largura da Perna	7 cm	5 cm
Axila até ao Ombro	16 cm	18 cm
Ângulo de Inclinação das Costas	- 20° + 40° cm	- 20° + 40° cm
Largura da Coxa	14 cm	17 cm

APOIO DE CABEÇA

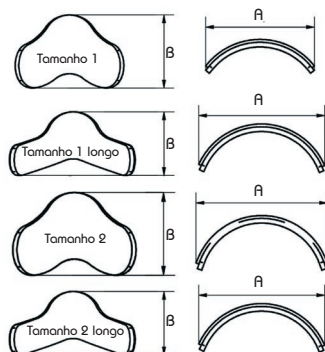


	A	B
tamanho 1	22 cm	15 cm
tamanho 1 longo	28 cm	16 cm
tamanho 2	24 cm	19 cm
tamanho 2-longo	28 cm	21 cm

APOIO DE COSTAS

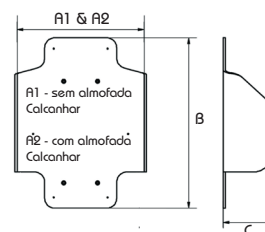

	A1	A2	B	C
Tamanho 0	29 cm	26 cm	46 cm	13 cm
Tamanho 1	33 cm	30 cm	46 cm	13 cm
Tamanho 2	33 cm	30 cm	46 cm	18 cm
Tamanho 3	36 cm	33 cm	48 cm	18 cm

APOIO DE PÉS

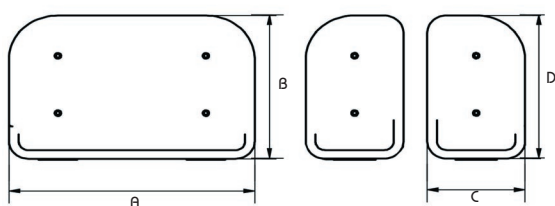

A	B	C	D
38 cm	26 cm	19 cm	26 cm



ZITZI SHARKY

ACESSÓRIOS

Apoio de cabeça TM.1



Apoio de cabeça longo



Apoio de cabeça TM.2



Apoio de cabeça plush 25 cm



Apoio de cabeça plush 25 cm



Pro Série Junior



Pro Série Junior sub.



Costas Ajustáveis



Apoio Pélvico



Apoio de braço superior



Apoio de Braço



Cinto Pélvico



Patim Único




Patim Duplo



Proteção Soft para Patim



Tabuleiro

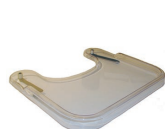

Barra de Empurrar



Moldura de Actividade



Colete



Colete com Feixo



Barra Cruzado



Colete em "H"



Interface adaptação



BOAVISTA SOLUTIONS, LDA
Rua Eng° Ezequiel de Campos, 541-2° . Zona Industrial do Porto
4100-233 Porto Portugal
Tel. +351 22 615 11 50 . Fax. +351 22 615 11 52
info@boavistasolutions.eu . www.boavistasolutions.eu

